

İçin montaj talimatı

Lerman HARO 2000

- Bel çevresine göre birimin boyutunu seçin:

Model 145	
küçük	71.12-81.28cm
orta	86.36-96.52cm
büyük	101.6-111.76cm
ekstra büyük	116.84-127cm
büyük beden	132.08-142.24cm

Model 145-U (çok amaçlı)	
Küçük/ orta	71.12-96.52cm
Büyük/ ekstra büyük	96.52-121.92cm
büyük beden	121.92-147.32cm

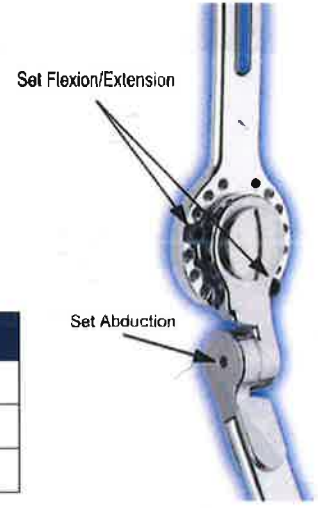


Fig. 1

- Takmadan önce, birlikte verilen kalça abdüksiyon miktarını 0,3175cm altıgen anahtar. (Şekil 1'e BAKIN)
- Fleksiyon / uzatma sınırlarını ayarlamak için birlikte verilen 0.357cm altıgen anahtarı kullanın. (Şekil 1'e BAKIN)
- Tamamlandığında bu vidaları TAMAMEN sıktığınızdan emin olun.

Bağlanıyor Lerman HARO 2000

- Hasta yatakta uzanırken, hastanın uyluğunu uyluk koluğuna yerleştirin. Uyluk kafını takarken, diz fleksiyonuna engel olmamasına dikkat edilmelidir.
- Arka astarı hastanın arkasının altına kaydırın. Üst marjı ön bant üstün iliak krestle bile olmalıdır. Leğen kemiğini sabitleyin kanca ve halka kayışları ile bantlayın.
- Hastadaki ortez ile kalça eklemi enine düzlemde hizalanabilir. Bunu yapmak için, pelvik ve uyluk bölümlerindeki bağlantı vidalarını gevşetin, ardından eklemi ilerletme çizgisini takip edene kadar dahili veya harici olarak döndürün. Sıkılaştırmak istenen konumu korumak için vidaları. Ek dönme ayarlamaları gerekirse daha sonra yapılır. (Şekil 2'ye BAKIN)



Fig. 2

Bakım Talimatları

- Hastayı ve / veya bakıcıyı HARO'yu nasıl takıp çıkaracağı konusunda bilgilendirin. Maksimum için gücü tutarak, tiftik, gevşek teller ve diğer malzemeleri kancadan uzak tuttuklarını vurgulayın.
- Kirlendiğinde, nem emen astarlar yumuşak sabunla elle yıkanabilir ve havayla kurutulabilir.
- Toksik olmayan, lateks içermeyen RC bantları kavrama yeteneklerini kaybederse, sabunlu suyla yıkanabilir, durulanır ve kullanmadan önce hava ile kurumaya bırakılır.



Acorn Regulatory Consultancy Services Limited
Knockmorris Cahir Co. Tipperary
Ireland Postcode: E21 R766

US Patent 6,540,703
Lerman HARO 2000 is a trademark of
Becker Orthopedic Appliance Company
Rev. 3/17

800-521-2192 • 248-588-7480
Beckerorthopedic.com

